




QuikRead go[®] easy CRP

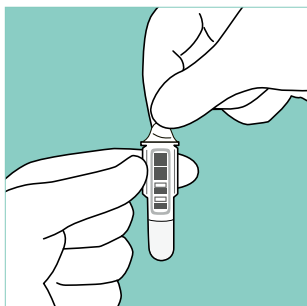


1 Távolítsa el a küvetta védőfóliáját. Ne érintse a küvetta alsó részén található átlátszó, sima felületeket.

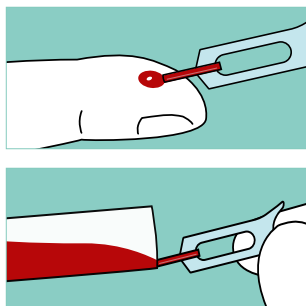


2 Tartsa a QuikRead go Sample Collector 10 µl-t szinte vízszintesen, csak a minta felszíne alá. Töltse fel teljesen a mintagyűjtő kapilláris eszközt.

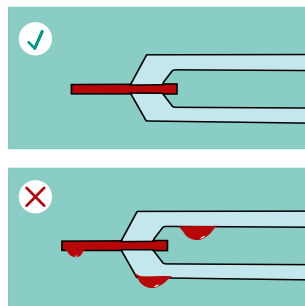


Fontos! Ellenőrizze, hogy a kapilláris rész teljesen feltöltődött-e. **Ne törölje le a mintagyűjtő eszközt!** Ha többlet minta van a mintagyűjtő eszközön, dobja ki a mintagyűjtőt eszközt.

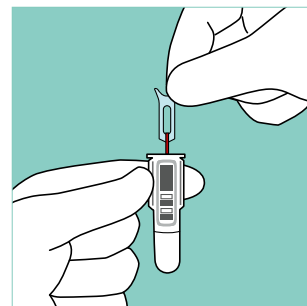

3 Helyezze a mintagyűjtőt eszköz a küvetta 2 percen belül.

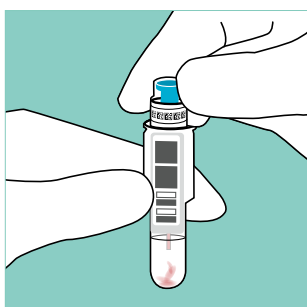

4 Zárja be a küvetta a easy CRP reagens kupakkal. Ne nyomja le a reagens kupak türkiz belső részét. Futtassa a tesztet 2 órán belül.

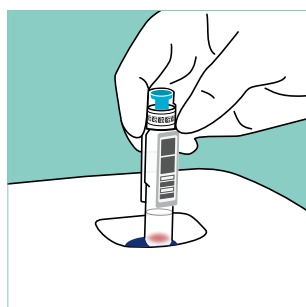

5 Válassza ki a **Mérés** lehetőséget a QuikRead go készülék kijelzőjén. Helyezze a küvetta helyesen a készülék mérőrekeszébe. A vonalkódnak Ön felé kell lennie.



6 A mérés befejeztével az eredmény megjelenik a képernyőn, és a küvetta automatikusan kiemelkedik ha a mérés befejeződött.

A mérés elvégzése előtt olvassa el a használati utasítást.

QuikRead go[®] easy CRP



Készlet

Bontatlan készlet tárolása 2–25°C-on: a készlet **lejárati idejéig**



Küvetták

Bontatlan fóliatasak 2–25 ° C-on: a készlet **lejárati idejéig**

Bontatlan küvetták alumínium-védőfólia nélkül

Tárolja 2–8°C-on: **6 hónapig** / Tárolja 18–25°C-on: **3 hónapig**



Felnyitott
küvetta

A mérés elvégzése előtt hagyja a küvetát szobahőmérsékletűre felmelegedni. A minta a pufferoladatban **két órán** át stabil.

Végezze el a mérést a küvetta felnyitásától számított **két órán** belül.



Reagenskupakok
tartályban

Bontatlan tartály tárolása 2–25°C-on a készlet **lejárati idejéig**

Az első felbontás után 2–25°C-on **6 hónapig**



Mintagyűjtő
eszközök

Tárolás 2–25°C-on: a Sample Collector 10µl doboz **mintagyűjtő
lejárati idejéig**



CRP kontroll-
anyagok

Bontatlan üvegcsé 2–8°C-on: a **lejárati idejéig**

Felnyitott üvegcsé 2–8°C-on: **2 hónapig**

Kapcsolat

Aidian Oy Finnország

HU, CZ, SK, PL képviselő:

Csehország, Prága, Bělohorská 57

Magyarországi munkatárs telefonszáma:

+36205019012

Megrendelés: info@aidian.hu

www.aidian.hu / www.quikread.hu

www.tackleamr.com / www.testcrp.hu

Termék	Kat. szám
QuikRead go easy CRP és QuikRead go Sample Collector 10µl	153287
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go készülék	135867
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211